

# Desatascador de sonda de alimentación enteral DeClogger®

DeClogger de Bionix® ayuda a los profesionales de atención médica a despejar sondas gástricas, de alimentación yeyunostómica y GEP en menos de dos minutos para restablecer la administración de medicamentos y reducir el reemplazo prematuro de las sondas.



## PROBLEMA

Inevitablemente, con el tiempo, las sondas gástricas, de alimentación yeyunostómicas y de gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) se obstruyen e impiden a los pacientes recibir nutrientes y medicación.

## SOLUCIÓN

DeClogger, un instrumento seguro y flexible con rosca que perfora oclusiones para restablecer la nutrición y la administración de medicamentos a pacientes con sondas de alimentación enteral obstruidas.

## RESULTADOS

Sondas de alimentación enteral sin obstrucciones en menos de dos minutos y capaces de brindar a los pacientes los nutrientes y la medicación que necesitan.

*“DeClogger ha reducido en gran medida mi necesidad de reemplazar las sondas”.*

- Scott Polsky, médico



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussels, BELGIUM  
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States  
Phone: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS


# Desatascador de sonda de alimentación enteral DeClogger®

OFERTA DE PRODUCTOS - Los DeCloggers vienen empaquetados de a 10 por caja.

GASTROSTOMÍA O YEYUNOSTOMÍA



**DeClogger azul | N.º 911**  
 Tamaño: 14 - 16 escala francesa  
 Longitud: 39,5 cm  
 Compatible con ENFit®

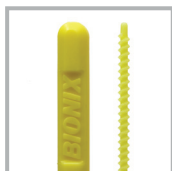

**DeClogger amarillo | N.º 912**  
 Tamaño: 16 - 22 escala francesa  
 Longitud: 39,5 cm  
 Compatible con ENFit®



**DeClogger verde | N.º 913**  
 Tamaño: 20 - 22 escala francesa  
 Longitud: 39,5 cm  
 No compatible con ENFit®

TIPO GEP O DE REEMPLAZO



**DeClogger marrón | N.º 921**  
 Tamaño: 14 - 16 escala francesa  
 Longitud: 21,5 cm  
 Compatible con ENFit®



**DeClogger naranja | N.º 922**  
 Tamaño: 18 - 24 escala francesa  
 Longitud: 21,5 cm  
 Compatible con ENFit®

## PRUEBAS EN BANCO

Prueba en banco realizada	Tipo de prueba	Situación	Cantidad de pruebas	Resultados de la prueba	Nivel C/R
Eliminación de obstrucción	Uso simulado	Tam. máx. de la sonda y tam. mín. de la sonda; peor situación posible	n=30/tamaño del sonda	100 % de éxito	95/90
Tiempo para eliminar la obstrucción				PROM. + DE < 2,0 mín.	
Falla del componente				Sin fallas	
Compatibilidad con ENFit				100 % compatible	

\*Se realizaron pruebas en banco de laboratorio en Bionix en las peores situaciones posibles. Las sondas se obstruyeron utilizando una oclusión de proteínas coaguladas y fibra. Se utilizaron las instrucciones de usuario de DeClogger® para preparar y desobstruir oclusiones. Se utilizó un cronómetro para medir el tiempo total del procedimiento, que comenzó con una verificación de permeabilidad y finalizó al momento de la desobstrucción visible (comprobada con una jeringa). La peor situación posible se define como la sonda más grande indicada y la sonda más pequeña indicada para cada tipo de DeClogger. "Compatibilidad con ENFit" se define como la capacidad del DeClogger de pasar libremente en el dispositivo de alimentación aprobado para ENFit sin aplicar fuerza innecesaria para introducirlo.



ENFit® y NRFit™ son marcas comerciales de GEDSA.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LOS PROBLEMAS DE TODOS LOS DÍAS

800.551.7096 · [www.bionix.com](http://www.bionix.com)